

探生AI全自动有形成分 镜检一体机



TS-V5001





联系我们



重庆探生诊断技术有限公司

- ② 重庆市两江新区复兴街道悦复大道28号17幢
- @ 023-68616605

超强功能集成

血液形态检测 特定蛋白检测 粪便检测 尿液检测

预期可扩展项目

皮肤病检测 | 肿瘤病变筛查 | 传染病免疫检测等



	血液检测/血液检测 +炎症蛋白	粪便检测	尿液检测	
样本类型	全血	粪便	尿液	
检测原理	Al镜检分析、免疫层析	AI镜检分析	Al镜检分析	
检测时间	10 min	10 min	≤ 15 min	
加样量	100 μL	120 µL	≤ 200 µL	
试剂保质期	24个月	24个月	24个月	
试剂储存、运输条件		环境温度: 5-30℃		
仪器维护方式	开机自检+定期擦拭			
尺寸 (mm)	226.5x343.5x329.5			
重量	<15kg			
数据接口	Rj45数据接口、RS232数据接口、双USB数据接口			
电源要求	220V AC、50Hz			

	检测项目		具体检测项目
血液检测	血常规29项	白细胞指标	白细胞计数(WBC);中性粒细胞计数(Neu#)、淋巴细胞计数(Lym#)、单核细胞计数(Mon#)、嗜酸性细胞计数(Eos#)、嗜碱性细胞计数(Bas#)、中性粒细胞百分比(Neu%)、淋巴细胞百分比(Lym%)、单核细胞百分比(Mon%)、嗜酸性细胞百分比(Eos%)、嗜碱性细胞百分比(Bas%)
		红细胞指标	红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积 (HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白量(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞分布宽度-CV值(RDW-CV)、红细胞分布宽度-SD值(RDW-SD)、网织红细胞数目(RET#)、网织红细胞比值(RET%)、网织红细胞体积(MCVr)、网织红细胞分布宽度变异系数(RDWr-CV)
		血小板指标	血小板计数(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、血小板比容(PCT)、大型血小板细胞数(P-LCC)、大型血小板比例(P-LCR)
ڪي مار		犬C反应蛋白	cCRP
炎症	犬、猫2项	猫血清淀粉样蛋白A	fSAA
	粪便21项	寄生虫/虫卵	蛔虫卵(ALE#)、钩虫卵(ANE #)、绦虫卵(CEE #)、 复孔属绦虫卵(DIP #)、迭宫属绦虫卵(SPI #)
		肠道原虫	毛滴虫(TRI #)、贾第鞭毛虫(FLA #)、球虫(COD #)
粪便检测		病原微生物	球菌(COS #)、杆菌(BACI #)、球杆比(C/B)、酵母菌(YEA #)、弯曲杆菌(CAM #)、芽孢杆菌(BAC #)
		细胞	红细胞(RBC #)、白细胞(WBC #)、上皮细胞(EPC #)
		消化功能	淀粉颗粒(STA #)、脂肪滴(LFAT #)、植物纤维 (PLA #)、肌纤维(AF #)
尿液检测 (项目开发中)	尿检	管型	颗粒管型等
		结晶	草酸钙结晶等
		细胞	红细胞、白细胞等
		病原体	球菌、杆菌、酵母菌等
		其他	脂滴等






特定蛋白 血液形态 检测 检测 FANTIBODY 探生 传染病 粪便检测 免疫检测 肿瘤病变 筛查

预期可扩展项目: 皮肤病检测、肿瘤病变筛查、传染病免疫检测等



③ / 核心技术 //

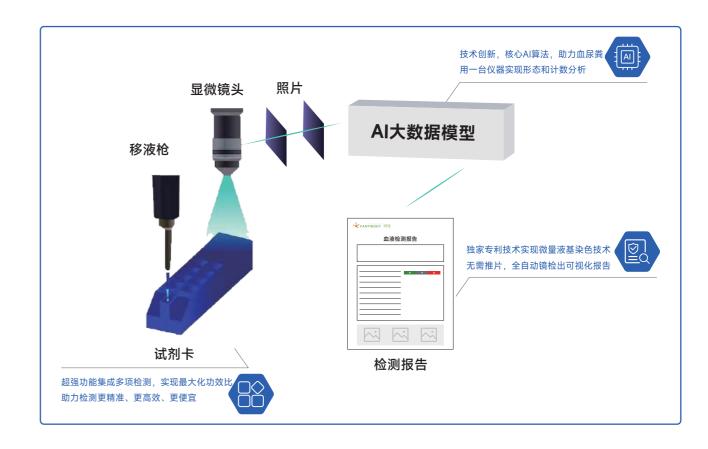

功能多样

- ◇ 血检、炎症、粪检、尿检一体
- ◇ 数值指标与图片分析报告互相印证
- ◇ 替代绝大部分镜检项目

一次操作,全自动出报告

- ◇ 自动解离、自动染色、自动涂片、自动镜检,无需人工操作
- ◇ 仪器标准流程操作,无人为误差影响,重复性好
- ◇ 仪器自动识别耗材是否正确使用,避免浪费
- ◇ 仪器与服务网站自动同步数据,报告传输极为方便

AI赋能精准诊断

- ◇ 先进的AI图像识别技术
- ◇ 庞大的临床图片数据库
- ◇ 精准的诊疗建议



加入样本 全血(混合EDTA) 粪便(混合稀释液)



上机检测 10分钟<mark>自动出结</mark>果



打印报告 仪器、网页、小程序端均可查看结果 报告是否带图自由选择

TS-V5001 | AI全自动镜检一体机 TS-V5001 | AI全自动镜检一体机

② / 独特优势 / ○







AI全自动、多样本、多种类

集多样本全自动处理系统、液基形态学Al识别技术、可成长型Al数据库等全球领先技术 于一体的多功能平台,代表了当前AI技术在宠物界的最先进应用。

长储存、单开单用

试剂卡常温储存2年,单份独立包装,无试剂浪费,既省心又经济。

无液路、免维护


POCT一体式试剂卡设计、无液路、免维护、故障率极低、无废液处理担忧,既方便又经济。

(人) / 血液形态检测 //


✔ 血液细胞形态学


告别传统推片,独创液基染色技术,血常规检测同时输出形态图:异常白细胞、网织红细 胞、血小板凝聚等。

全自动精准快速生成多维度临床报告(参数指标&形态学)

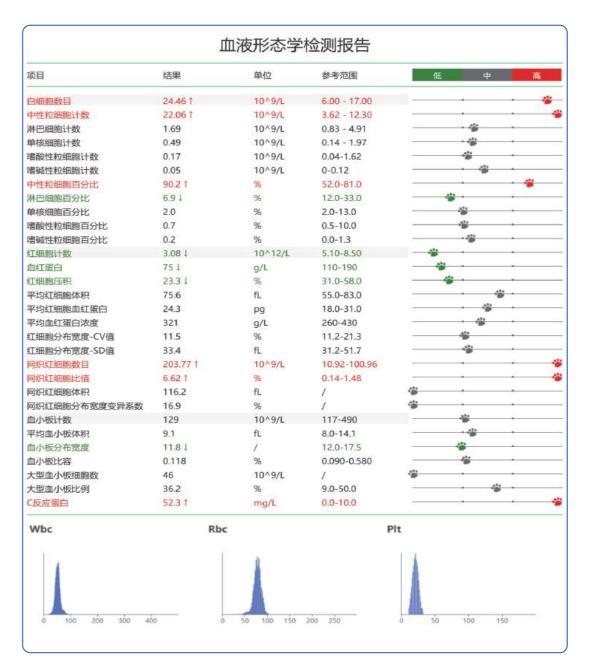

全自动精准快速生成多维度临床报告(参数指标&形态学)

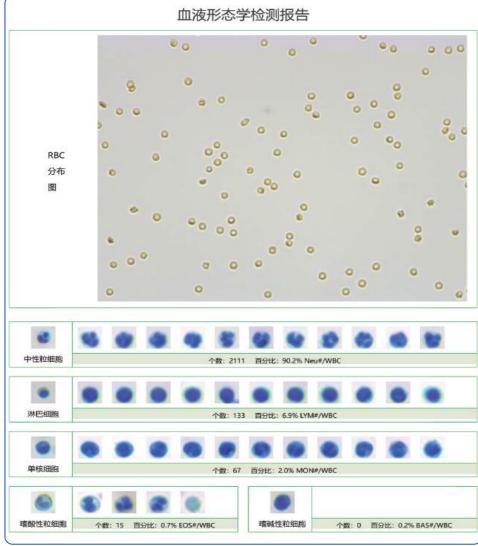

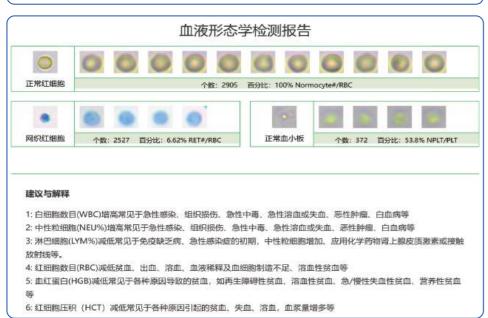


⟨→ 特定蛋白检测 (cCRP、fSAA) //

高灵敏度优质的抗体免疫检测,结合血常规精准指标,更快捷、更精准诊断炎症感染的类型及严重程度。


★ fSAA (猫血清淀粉样蛋白A)

在猫出现多种炎症或传染性疾病时,SAA能最快速产生应答,因而SAA是专门评价宠物有无炎症的特异性指标,比白细胞更精准,可以补充白细胞检测误差上的短板,一般是两者结合评估猫咪的炎症情况。结合fSAA这个指标,可以排除那些白细胞增高、但炎症反应并不高的"假炎症情况"。

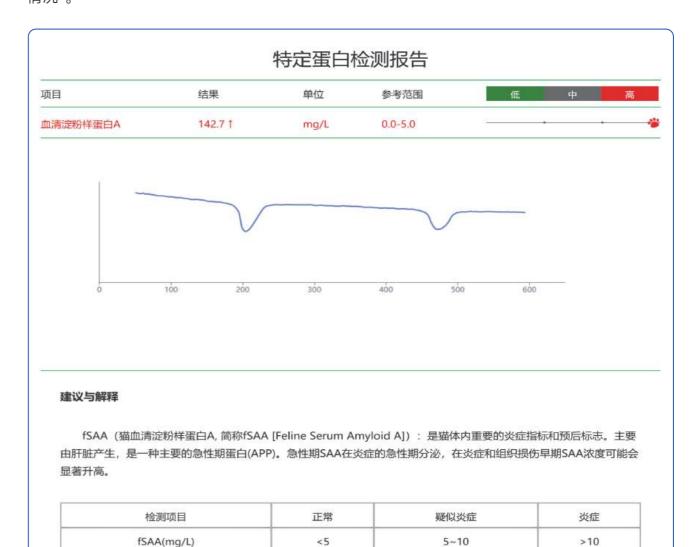

TS-V5001 | AI全自动镜检一体机 TS-V5001 | AI全自动镜检一体机

犬C反应蛋白是一种在犬体内广泛存在的急性时相反应蛋白。cCRP检测可监测所有可引起 全身炎症的疾病,例如免疫介导性溶血性贫血(IMHA),炎症性肠病(IBD),利什曼病,多 发性关节炎,胰腺炎和子宫蓄脓。CRP检测的意义不仅限于初诊时的筛查和疾病严重程度的判 断,而且对于病情的监测和疗效的评估具有重要意义!

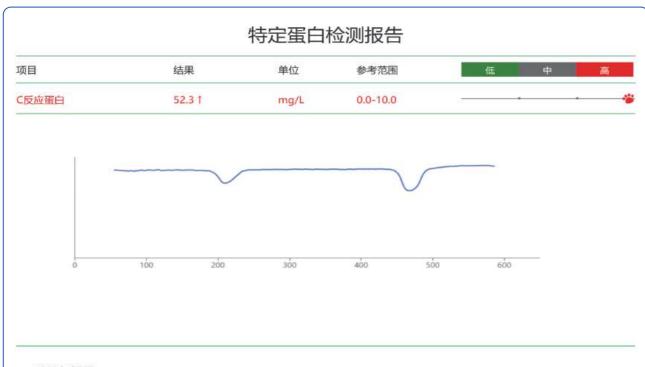

建议与解释

cCRP (犬C反应蛋白, 简称cCRP [Canine C-Reactive Protein]): 是犬体内最有效的炎症指标之一。急性心肌梗 死、创伤、感染、炎症、外科手术、恶性肿瘤浸润时显著升高,是肝脏细胞合成的急性期蛋白。正常犬血浆中CRP含量 极低。肝脏合成功能受损、营养不良、体液免疫功能低下、单纯病毒感染未继发其他感染、内分泌疾病、部分心脏病、 癫痫、糖尿病时,CRP变化不明显。

检测项目	正常	轻度炎症	中度炎症	重度炎症
cCRP(mg/L)	<10	10~30	30~100	>100



✔ 粪便形态学

对肠道传染病、消化道疾病和寄生虫等进行形态学分析,包括血细胞、真菌、孢子、多 种虫卵和成虫、结晶等, 自动检测分析并输出可视化报告。

全自动精准快速生成多维度临床报告(参数指标&形态学)

宠物昵称:布丁 宠物种类: 犬 性别: 雌性 年龄: 岁月

宠主姓名: 联系方式: 检测时间: 2024-05-19 17:13:32

样本编号: 1241800924566134784 设备编号: V2431510019

粪便形态学检测报告

项目	结果	单位	参考范围		
粪便颜色	1	1	1		
粪便性状	1	/	1		
蛔虫卵	0	个	0-0		
钩虫卵	0	^	0-0		
绦虫卵	0	^	0-0		
复孔属绦虫卵	0	^	0-0		
迭宫属绦虫卵	0	^ ^ ^ ^ ^	0-0		
毛滴虫	0	个	0-0		
贾第鞭毛虫	0	个	0-0		
球虫	91	个	0-0		
球菌	3990 ↑	个/ug	241-1215		
杆菌	26157 1	个/ug	850-23173		
球杆比	0.153	1	0.017-0.156		
弯曲杆菌	0.00	个/ug	0.00-50.00		
芽孢杆菌	0.00	个/ug	0.00-60.00		
酵母菌	0.25	个/ug	0.00-250.00		
红细胞	0.00	个/ug	0.00-1.00		
白细胞	0.00	个/ug	0.00-0.00		
上皮细胞	0.00	个/ug	0.00-20.00		
淀粉颗粒	9.25	个/ug	0.00-15.00		
脂肪滴	0.50	个/ug	0.00-2.00		
植物纤维	0.00	个/ug	0.00-0.50		
肌纤维	0.00	个/ug	0.00-10.00		

● 全自动精准快速生成多维度临床报告(参数指标&形态学)




✔ 尿液形态学

对尿液成分进行形态学分析,包括管型、细胞、病原微生物、结晶、脂滴等,全自动检测,深度融合领先的AI (Artificial Intelligence, 人工智能)技术,对检测样本进行快捷分析,并输出可视化报告。并增加疑视区,结合血细胞6分类、特定蛋白检测、粪检结果,以及临床症状,最大限度提升检测精准度。




ቍ 全自动精准快速生成多维度临床报告(参数指标&形态学)

管型

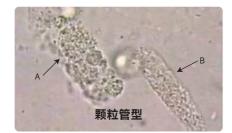


主要反映肾脏功能是否出现炎症或损伤

细胞

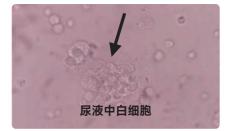

提示泌尿系统是否出现炎症或出血

病原微生物

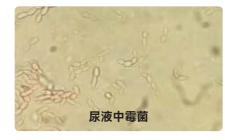


初筛泌尿系统是否感染

结晶



反应肾脏及机体离子代谢功能

脂滴

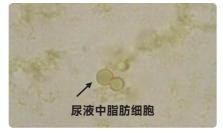

常见于膀胱炎、糖尿病、肥胖 或人工导尿情况

About us

关于我们

重庆探生诊断技术有限公司是一家 专注于动物疾病诊断试剂及仪器的研 发、生产、销售并提供整体解决方案的 公司。

公司以提供精准、快速、便捷的诊断为目标,拥有诊断原料研发及生产、qPCR检测、免疫层析、ELISA等技术平台,专业的仪器研发生产团队,并深度融合当代最领先的AI (Artificial Intelligence, 人工智能)技术,立足用户需求,提供精准的产品和优质的服务,为全球动物健康助力。

作为母公司,重庆探生科技有限公司,致力于为国内外IVD企业提供高质量的产品和专业技术服务。公司主要产品是基于基因工程技术的重组抗原与抗体,及免疫检测试剂解决方案。

产品类别涵盖传染病、心血管疾病、肿瘤标志物、炎症、肝功肾功、妊娠、胃功能等。现有产品达到甚至超越了国际先进水平,已经被国内外的厂商用于注册和规模销售,目前探生业务已遍布全球,覆盖亚洲、北美洲、南美



洲、大洋洲、欧洲等数十个国家地区,获得国内外客户的一致好评,业务发展呈迅猛攀升之势! 先后被评为,重庆市诊断抗体工程技术研究中心,国家高新技术企业,重庆市"专精特新"小巨人 企业,并通过ISO体系认证。